

取扱説明書

高機能ユニット

TRD-10



■ このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。

■ 「取扱説明書」は

- ・ 1部を現場用として、常に参照できる状態を保ってください。
- ・ 1部を保存用として、大切に保管してください。

SAKAimed

もくじ

安全上のご注意	2
安全にお使いいただくために	3
各部の名称	3
使用方法	4
操作パネルの使い方	4
操作方法	4
保証とアフターサービス	7

安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、各注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

注意事項を次のように区分しています。



危険 ... 取り扱いを誤ると、
死亡または重傷を負うことに至るもの



警告 ... 取り扱いを誤ると、
死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの



注意 ... 取り扱いを誤ると、
傷害または物的損害の発生が想定されるもの



警 告

- ペースメーカなどの医療機器を使用している方は、絶対にチェストバンドを使用しないでください。



注 意

- 確実な測定を行うために、チェストバンド本体を素肌に直接装着してください。
- 心拍受信機の真横の位置は、心拍表示がされにくいので少し後方で走行してください。
- チェストバンドは注意して取り付けてください。
胸部の体型・体格には個人差があります。チェストバンドの電極部分が肌にしっかりと密着しないと、心拍数を表示できません。

安全にお使いいただくために

本取扱説明書は、高機能ユニット TRD-10専用となっています。
トレッドミルをお使いになるときは、トレッドミルの取扱説明書と本取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使いください。

取付可能機種

高機能ユニット TRD-10は、下記トレッドミルに取り付けることができます。


TRD-110

TRD-210

TRD-310

各部の名称

操作パネル

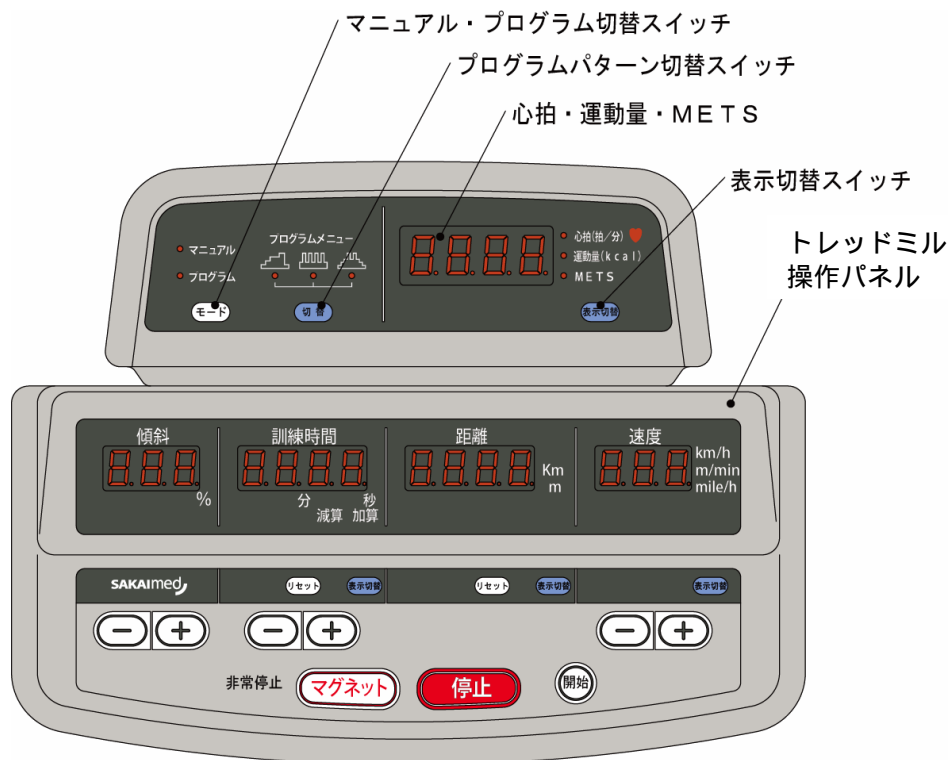

使用方法

操作パネルの使い方

マニュアル・プログラム切替スイッチ

マニュアル操作による走行とプログラムによる走行を選択するスイッチです。

プログラムパターン切替スイッチ

3種類のプログラムパターンから選択するスイッチです。

表示切替スイッチ

心拍・運動量・MET Sの選択ができます。

心拍数は、チェストバンドを胸に付け、操作パネルのハートマークが点灯しているときのみ表示します。

操作方法

- プログラムパターンは、3種類設定してあります。
- 心拍数を表示させる場合は、チェストバンドを胸部に取り付けます。
 - ①チェストバンド本体にベルトを取り付けます。
 - ②Polar のロゴを上向きにして、チェストバンド本体を直接胸の中央、心臓あたりの高さに付け、ぴったりと心地よくフィットするようにベルトの長さを調節します。(胸囲より約10～15 cm短め)
 - ③チェストバンド本体を持ち上げて胸から離し、裏側の溝になっている電極部分(2 か所)を濡らします。
 - ④濡らした電極部分が肌にしっかりと当たっていることを確認します。




警告 ペースメーカなどを使用している方は、絶対にチェストバンドを使用しない

- 心拍数表示は 60～220 拍/分です。


心拍数が 59 拍/分以下又は 221 以上になると“E r r o”が表示されます。
- プログラム走行の走行時間は、20 分間です。(減算)
- プログラムパターン走行を行うには、
 - ①速度単位切替スイッチで表示する速度単位を選択します。(プログラム選択後は変更できません)
 - ②マニュアル・プログラム切替スイッチを押し、プログラムを選択します。
 - ③プログラムパターン切替スイッチを押し、パターンを選択します。
 - ④速度増減スイッチの+を押し、最高速値を設定します。
 - ⑤開始スイッチを押すとベルトの回転が徐々に早くなり、プログラム設定速度に達します。
- プログラムのパターンを次に示します。



プログラムパターン 1

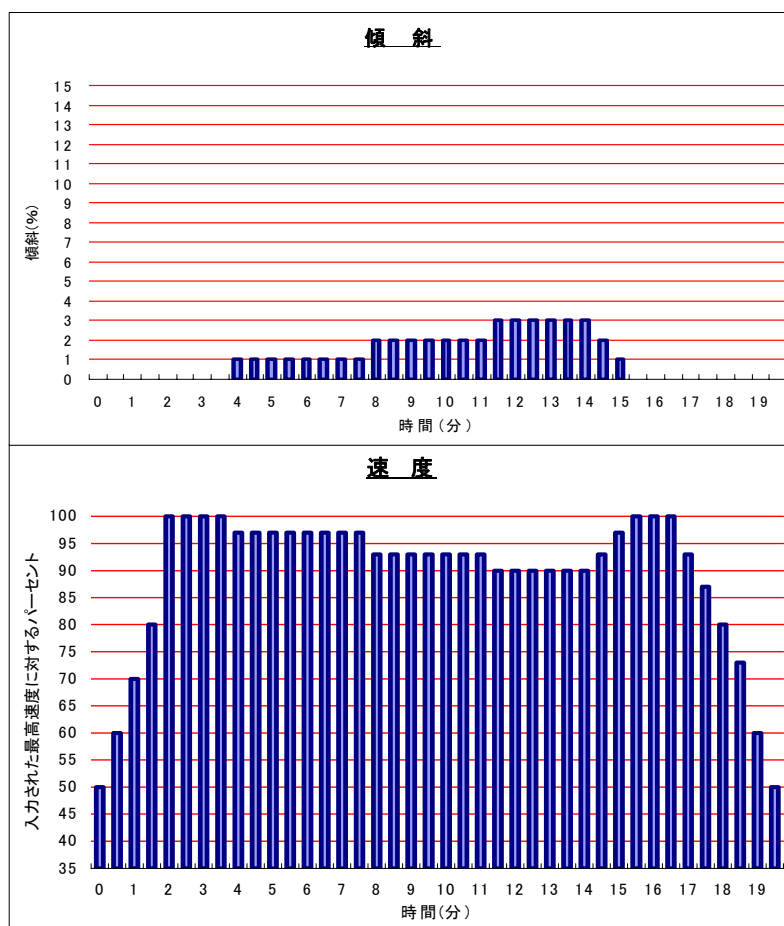


プログラムパターン 2

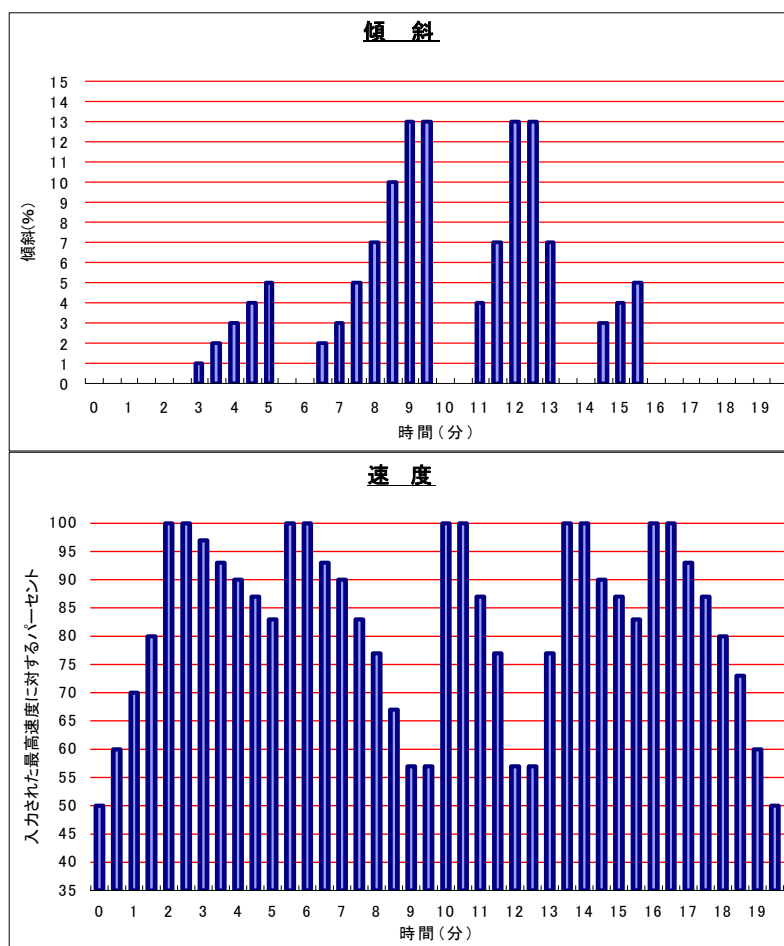



プログラムパターン 3

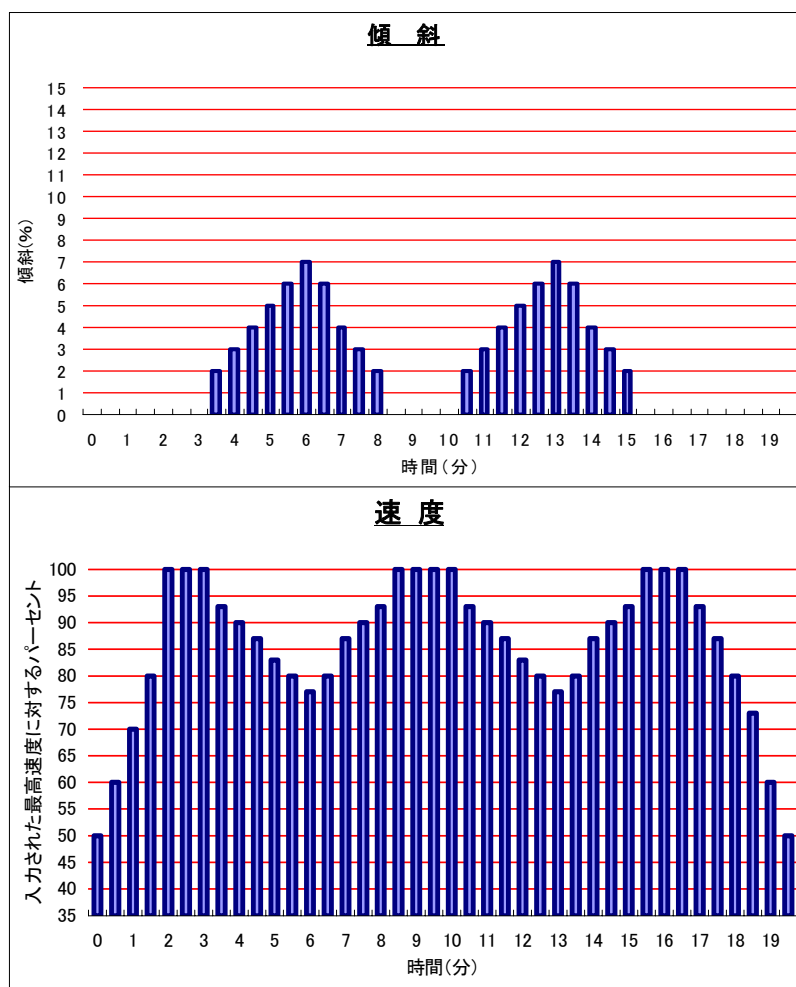

保証とアフターサービス

保証書と保証期間

- 保証書（別添）はよく読んで大切に保管してください。保証書がないと保証期間中でも代金を請求させていただく場合があります。
- 保証期間は、正常な使用状態で故障した場合 1 年間を上限とします。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼される場合

- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。
機種名 : TRD-10
お買い上げ年月： 年 月
故障状況(できるだけ詳細に)
住所、氏名、電話番号
- メーカーより指示のあるとき以外は、決してあけたり分解しないでください。

定期保守点検契約のお勧め

製品を長期間正常な状態で安全に使用できるように保証期間後の「保守点検契約」の締結をお勧めします。詳しくは「保守点検契約のお勧め」をご覧ください。弊社最寄りの営業所へお問い合わせください。